


ÜRÜN TANITIM KARTI

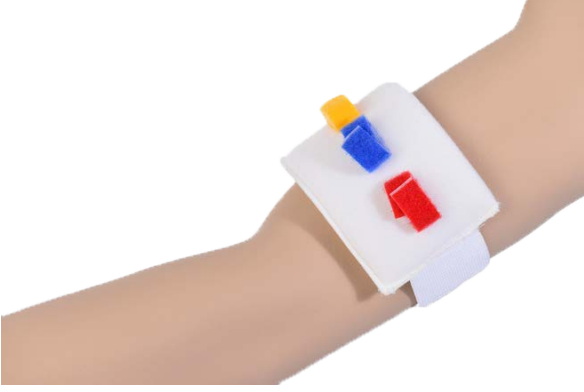

Adı:

Portmed

Tanımı:

Çoklu Kateter Sabitleme Bandı

Kullanıldığı alanlar:

Yoğun bakım servisi için geliştirilmiştir.

Birden fazla kateter bağlanması gereken hastalarda kateterlerin aynı anda sabitlenmesi için kullanılır.

Fonksiyonu:

3 adet kateteri aynı anda sabitleyip hastanın kolunda konuşturarak hastaya güvenlik ve konfor sağlar.

Teknik özellikleri:

Tek parça , şardonlanmış * elastik şeritten meydana gelmiştir.

Fiziki yapısı (dokuma şekli) itibarı ile cildin hava almasını sağlar.

Üzerinde kateterlerin yerleştirildiği ve sabitlendiği bir yastık vardır.

Yastığın üstünde ise velkro' **dan yapılmış ve özel form verilerek kateterleri kavrayıp sabitlenmesini gerçekleştiren kilit sistemi vardır.

3 adet kateteri aynı anda sabitler.

Bandın bir ucunda da kola sarıldıktan sonra sabitlenmesini sağlayan yine velkro 'dan mamul sabitleme aksesuarı vardır .

Yapısında lateks*** içermez.

Ürün non sterildir ve 30 derece su da,elle veya çamaşır makinesinde,ev tipi deterjan ile yıkanıp tekrar kullanılabilir.

(**Şardonlamak*** :Penye, pamuklu veya sentetik kumaşların yüzeylerinin özel bir metot ile tüylendirme işlemi,şardonlanmış dokuma ise bir yüzeyi tüylendirilerek yumuşak ve kadifemsi veya havlumsu hale getirilmiş dokuma üründür)

(**Velkro****: Çıt çıt veya düğme yerine kullanılan,üzerinde mikro düzeyde plastik kancacıklar olan ve bu mikro kancalar ile tüylü yüzeylere yapışan özel kumaş -cırtlı kumaş).

(**Lateks*****.Doğada bulunan birçok bitkinin salgıladığı ve hava ile karşılaştığında katılaştıran sütlü bir bitki özütüdür.Ancak özel olarak belirtilmedikçe genel olarak kauçuk'dan elde edilen öz süte verilen isimdir ve doğal kauçuk olarak tanımlanır.Lateks içeren ürünler temas ettiği deri yüzeyinde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve kabuklanma şeklinde belirtiler veren bir alerji (lateks alerjisi) oluştururlar,bu alerji zaman zaman hayati tehlikelere ulaşabilir).

Modeli / Kodu / Ölçüleri

Tek modeli vardır.

Kodu:HP MED

48,5 cm uzunluğunda 5 cm genişliğindedir.

Sabitlenme yastığı ise 15 x 8 cm ebatlarındadır.

Kullanımı:

Kola dikkatlice sarılır ve bir ucundaki velkro kilit bandı diğer ucun şardonlanmış yüzeyine iliştilirmek sureti ile sabitlenir.

Kateterler bandın üstündeki taşıma yastığında bulunan velkro kilitlerin üzerine yerleştirilir,kilidin iki parçadan ibaret kolları sondanın üzerinden aksi yönlere doğru getirilerek sabitlenir.

Dikkat edilecek hususlar:

Sabitlenme işlemi yapılırken bandın kan dolaşımını engellemeyecek sıkılıkta olmasına dikkat edilmelidir.

Velkro kilitlerin kateterleri tatlı sıkı kavradığına dikkat edilmelidir.

Ambalaj şekli:

Bir poşette bir ürün vardır , 25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.